

1 OZNAČAVANJE UZORAKA


1. Prije prikupljanja uzorka, označite papirnatu omotnicu u koju ćete pohraniti uzorak (vrsta ptice, identifikacijska oznaka ptice)
2. Istu oznaku upišite na Narudžbenicu
(dostupna na webu: <https://genos.hr/dna/narudzbenice/>)

2a IZUZIMANJE UZORKA PERA



1.a Iščupajte 3-5 prsnih pera, pazeći pri tome da pero sadrži kalamus (Slika A).

Izbjegavajte dodirivanje kalamusa prstima kako biste izbjegli kontaminaciju.

Ukoliko se na peru nalazi malo krvi, ostavite ga da se posuši na zraku prije pohrane u omotnicu.

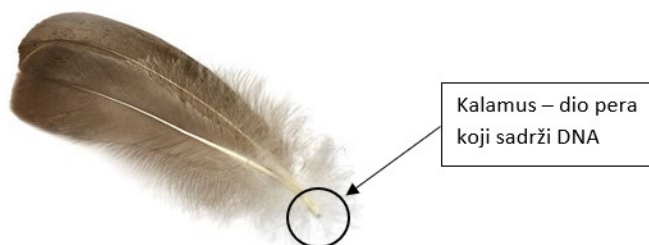

Slika A

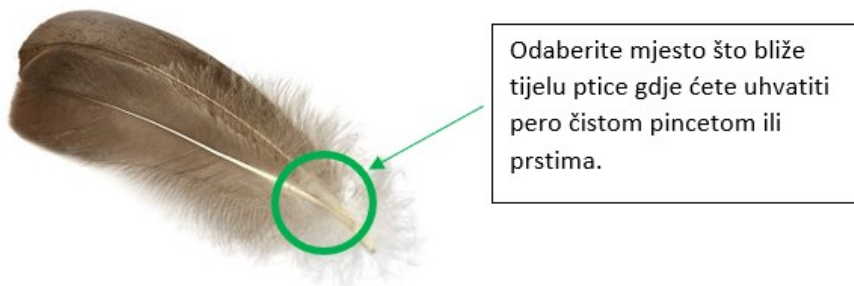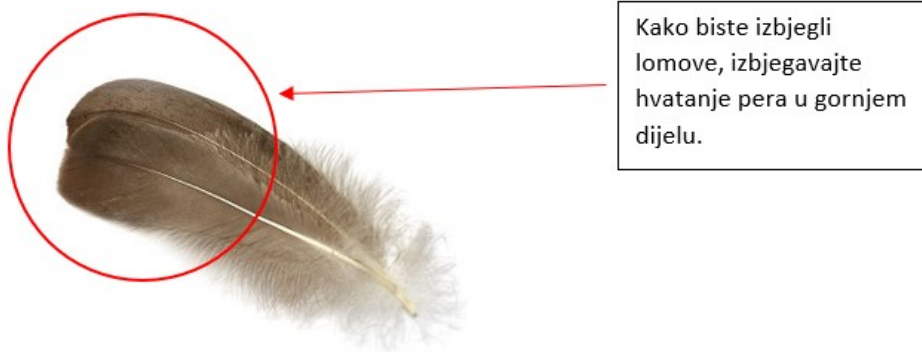

2.a Pohranite pera u papirnatu omotnicu sa oznakom uzorka.

Prikupljajte jedno po jedno pero.


Ako prikupljate pera od više ptica, dobro operite ruke između prikupljanja uzoraka različitih jedinki kako biste izbjegli kontaminaciju.

2b IZUZIMANJE UZORKA KRVI


1.b Označite karticu za prikupljanje uzorka krvi
(moguće je koristiti i papirnatu maramicu)



2.b Uzmite čistu tanku iglu i zabodite lagano u
nogu ptice

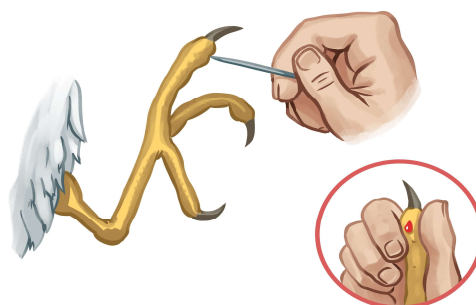

3.b Kapljice krvi prikupite na karticu za
prikupljanje unutar označenog kruga ili čistu
papiranu maramicu

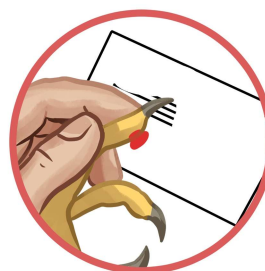

4.b Ostavite da se posuši na sobnoj temperaturi prije nego što ju pohranite u omotnicu za slanje
*Ako prikupljate uzorak krvi od više ptica, dobro operite ruke između prikupljanja uzoraka različitih
jedinki te dezinficirajte iglu kako biste izbjegli kontaminaciju.*

3 SLANJE UZORAKA NA ANALIZU

1. Uzorke za analizu možete poslati poštom ili dostaviti u laboratorij.
2. Uz uzorke je potrebno priložiti popunjenu i potpisanu narudžbenicu te potvrdu o uplati.

NAPOMENE I MJERE OPREZA:

- Pohranite svaki uzorak u zasebnu omotnicu
- Nemojte slati velika letna/repna pera, odrezana pera, pera bez kalamusa ili pera koja su sama otpala
- Prije povratka ptice u kavez, budite sigurni da se ptica dobro osjeća
- Uzorak čuvati na sobnoj temperaturi i ne ostavljati ga na izravan izvor topline ili sunčeve svjetlosti!