

## 1 OZNAČAVANJE UZORAKA


1. Prije prikupljanja uzorka, označite papirnatu omotnicu u koju ćete pohraniti uzorak (vrsta ptice, identifikacijska oznaka ptice)
2. Istu oznaku upišite na Narudžbenicu (dostupna na zahtjev naručitelja)

## 2a IZUZIMANJE UZORKA PERA



1.a Iščupajte 3-5 prsnih pera, pazeći pri tome da pero sadrži kalamus (Slika A).

*Izbjegavajte dodirivanje kalamusa prstima kako biste izbjegli kontaminaciju.*

*Ukoliko se na peru nalazi malo krvi, ostavite ga da se posuši na zraku prije pohrane u omotnicu.*

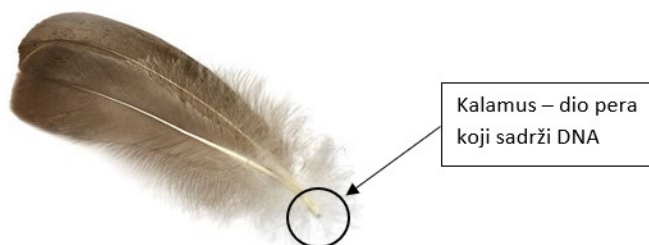

Slika A

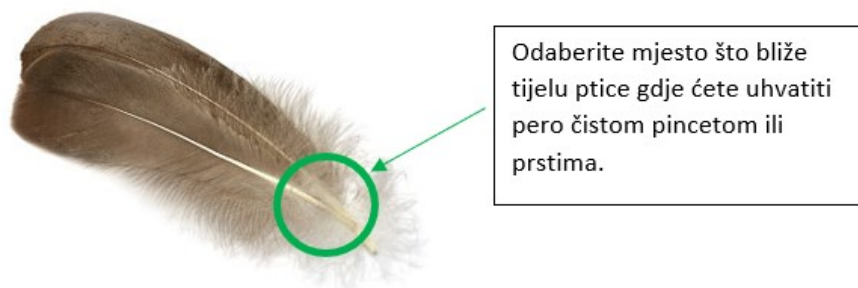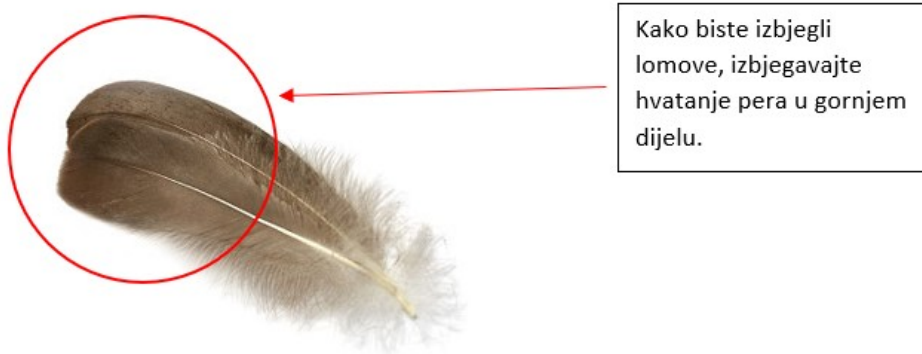

2.a Pohranite pera u papirnatu omotnicu sa oznakom uzorka.

*Prikupljajte jedno po jedno pero.*


*Ako prikupljate pera od više ptica, dobro operite ruke između prikupljanja uzoraka različitih jedinki kako biste izbjegli kontaminaciju.*

**2b IZUZIMANJE UZORKA KRVI**


1.b Označite karticu za prikupljanje uzorka krvi  
(moguće je koristiti i papirnatu maramicu)



2.b Uzmite čistu tanku iglu i zabodite lagano u  
nogu ptice

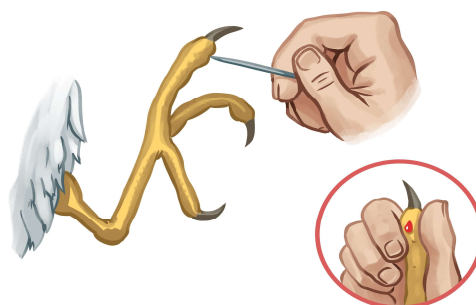

3.b Kapljice krvi prikupite na karticu za  
prikupljanje unutar označenog kruga ili čistu  
papiranu maramicu

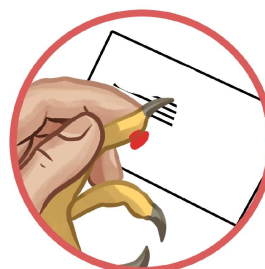

4.b Ostavite da se posuši na sobnoj temperaturi prije nego što ju pohranite u omotnicu za slanje  
*Ako prikupljate uzorak krvi od više ptica, dobro operite ruke između prikupljanja uzoraka različitih  
jedinki te dezinficirajte iglu kako biste izbjegli kontaminaciju.*

**3 SLANJE UZORAKA NA ANALIZU**

1. Uzorke za analizu možete poslati poštom ili dostaviti u laboratorij.
2. Uz uzorke je potrebno priložiti popunjenu i potpisanu narudžbenicu te potvrdu o uplati.

**NAPOMENE I MJERE OPREZA:**

- Pohranite svaki uzorak u zasebnu omotnicu
- Nemojte slati velika letna/repna pera, odrezana pera, pera bez kalamusa ili pera koja su sama otpala
- Prije povratka ptice u kavez, budite sigurni da se ptica dobro osjeća
- Uzorak čuvati na sobnoj temperaturi i ne ostavljati ga na izravan izvor topline ili sunčeve svjetlosti!